



血液檢體採檢注意事項

檢驗醫學部

2023

大綱


- 一. 標籤黏貼正確的重要性
- 二. 標籤資訊內容介紹
- 三. 採血管標籤標準採檢量標示
- 四. 血液採檢管標籤黏貼方式介紹
 - A. 一般採檢管
 - B. 固定採檢量
 - C. 血瓶類
- 五. 正確採血管順序
- 六. 採血試管開蓋與鎖回蓋子方法
- 七. 檢體未辨識提示



一、標籤黏貼正確的重要性

標籤黏貼正確位置加上標籤有**最低採檢量**的標記，可讓護理同仁方便確認採檢量是否足夠，避免採檢不足而退件。

二、標籤資訊內容介紹

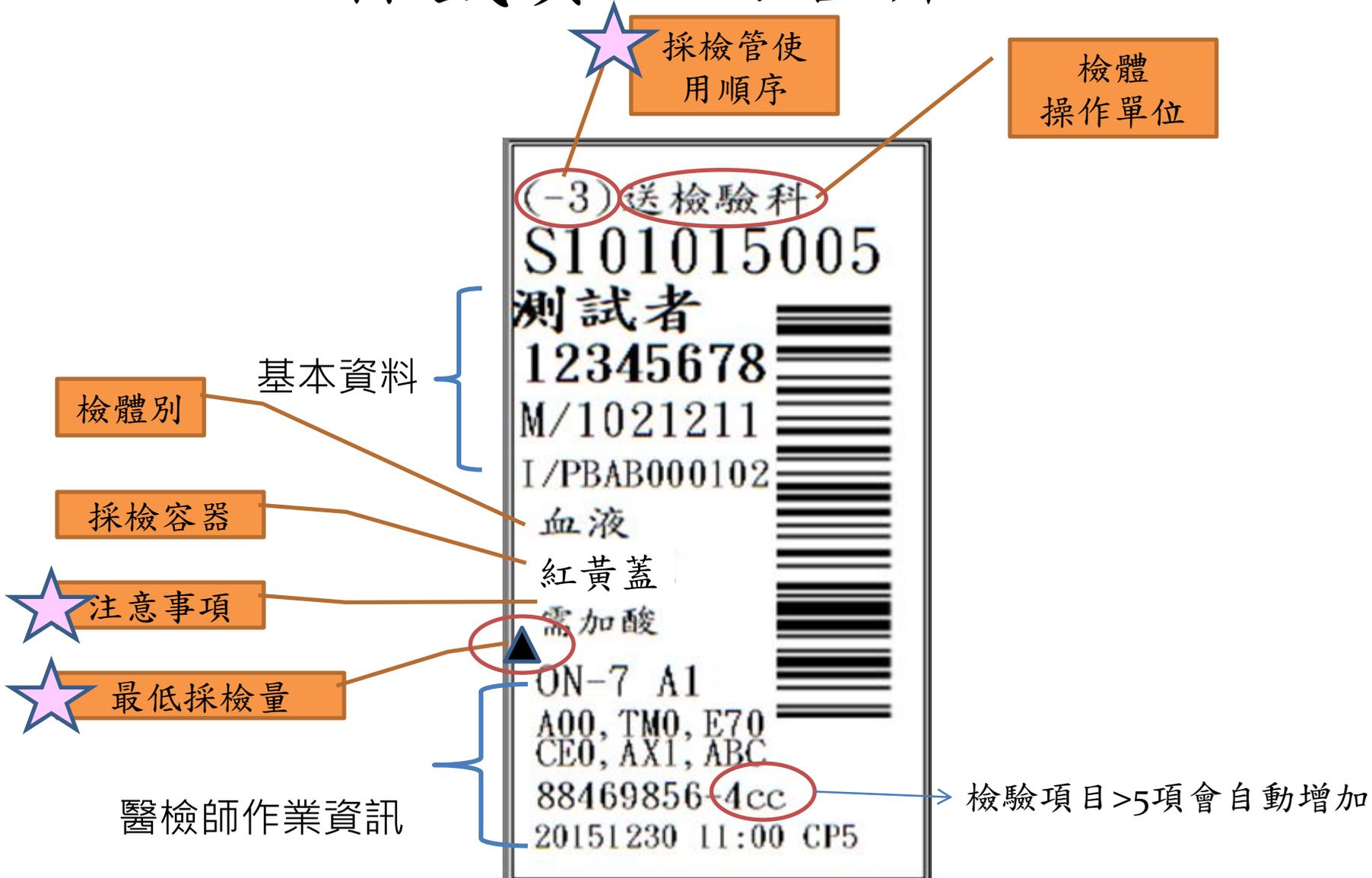

三、採血管標籤 標準採檢量標示

(依標準標籤貼法黏貼，採到三角形以上)



<p>(-4)送檢驗科 S101015005 測試者 12345678 M/1021211 I/PBAB000102 ▲血液 紅黃蓋 - ON-7 A1 LX, 008, UA TPI, Myo 88469856-4cc 20151230 11:00 CP5</p>	<p>(-4)送檢驗科 S101015005 測試者 12345678 M/1021211 I/PBAB000102 血液 紅黃蓋 - ▲ON-7 A1 LX, 008, UA TPI, Myo 88469856-2cc 20151230 11:00 CP5</p>
---	---



<p>(-4)送檢驗科 S101015005 測試者 12345678 M/1021211 I/PBAB000102 血液 紫頭 - ▲ON-7 A1 CBC 88469856-3cc 20151230 11:00 CP5</p>	<p>(-4)送檢驗科 S101015005 測試者 12345678 M/1021211 I/PBAB000102 ▲血液 紫頭 - ON-7 A1 CBC 88469856-4cc 20151230 11:00 CP5</p>
---	---

四、血液採檢管標籤黏貼方式介紹

一般採檢管

(3 c.c)採血管標籤標準黏貼方式 (靠左、靠上)

小綠管



一般採檢管

(3 c.c)採血管標籤 標準黏貼方式 (靠左、靠上)

檢體標籤 V 對齊
商標貼紙 V 記號
(留下紫色邊)

檢體標籤左緣緊貼
商標貼紙左緣
(保持垂直)

檢體標籤緊貼
商標貼紙
(保持水平)




小紫管

固定採檢量限制採檢管(藍頭、灰頭)

病人標籤上方切齊商標標籤，左方以不蓋住採檢量標示記號為原則

上方切齊商標
標條碼

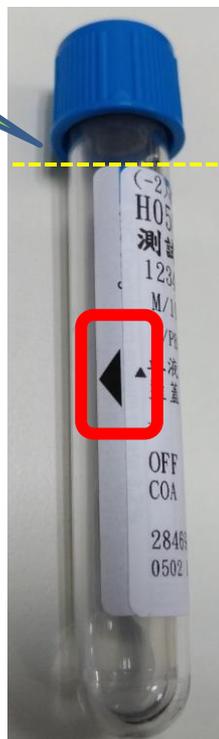

不要蓋住採檢量標示
記號(方便確認採檢量)



回縮式翼型採血針單採藍管時，需將管路內空氣排出，確保抗凝血劑與血液比例正確。



1

多抽一管

多準備一支紅頭
或藍頭試管



或者



2

排空氣

下針後先用紅頭
或藍頭抽1~2CC
(丟棄)




3

看血量

再採貼有病人姓名
標籤之藍頭管
與確認血量



合格
血量

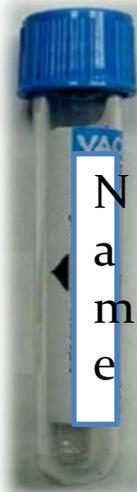

固定採檢量限制採檢管 (ESR管)


標籤黏貼前 → 黏貼步驟一 → 黏貼步驟二 → 標籤黏貼後

1 認明商標左邊緣線
2 認明商標下邊緣線


姓名標籤下邊請對齊商標下邊緣線

姓名標籤左邊請對齊商標左邊緣線
(請不要貼歪)

露出商標左邊緣線

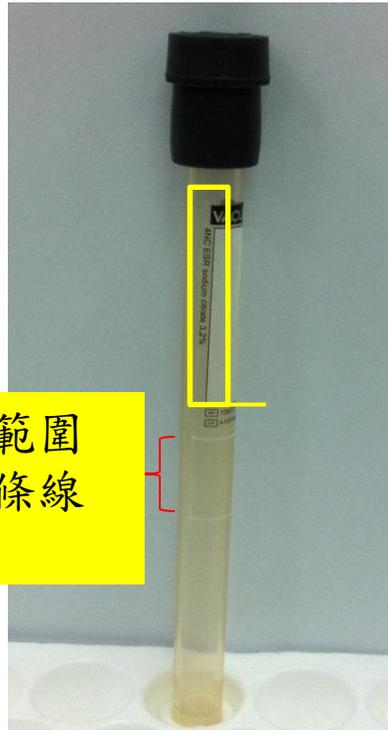

採檢範圍
在兩條線
之間

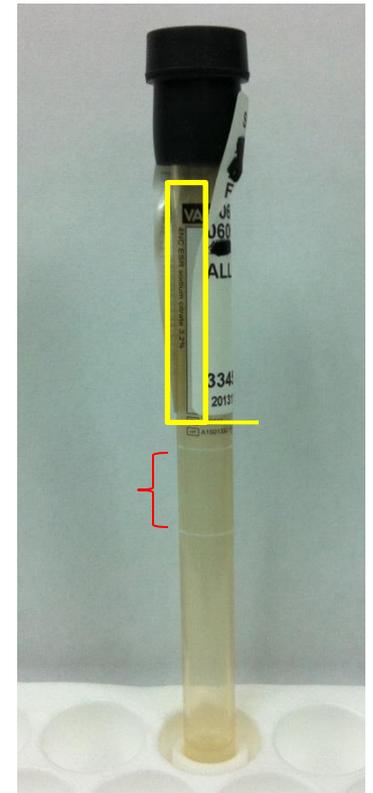


兒童血瓶



請認明瓶身標籤上的藍色方框

採檢標籤 靠左、靠上邊緣黏貼
(採檢標籤高度才會固定)

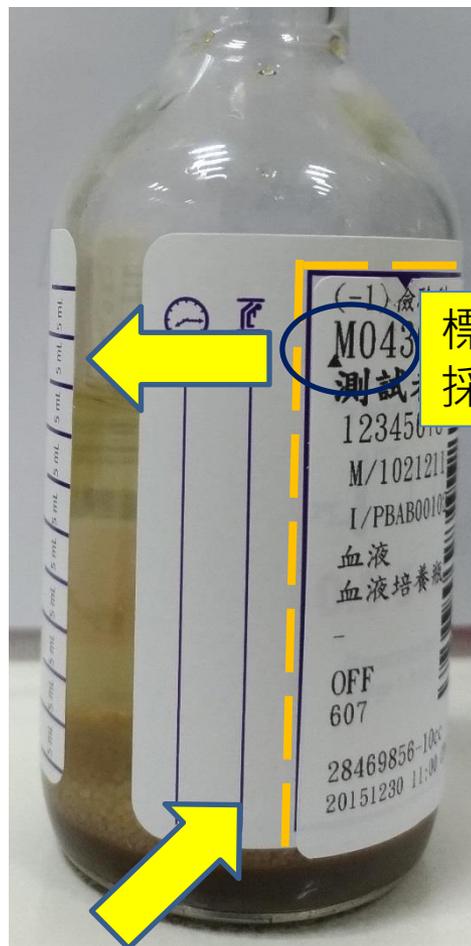

標準採檢量 3 c.c.
採血到三角形高度

採檢黏貼後示意圖

成人血瓶(含嗜氧、厭氧)



請認明瓶身標籤上的藍色方框

採檢標籤 靠左、靠上邊緣黏貼
(採檢標籤高度才會固定)



標準採檢量 10 c.c.
採血到三角形高度

採檢黏貼後示意圖

黴菌/結核菌 血液培養瓶



請認明瓶身標籤
上的藍色方框

採檢標籤 靠左、靠上邊緣黏貼
(採檢標籤高度才會固定)



標準採檢量 5 c.c.
採血到三角形高度

採檢黏貼後示意圖

五、正確採血管順序

無菌樣本
血瓶

採檢順序



藍

黑

紅

紅黃



淺綠

綠

Vein
Blood
GAS

紫

灰

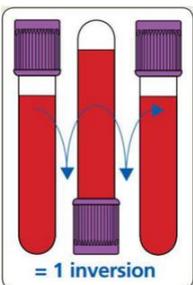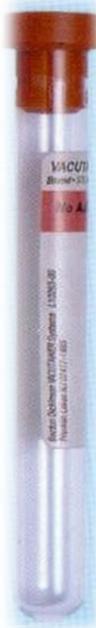

混合
次數

3-4

3-4

8-10

5-6

5-6

8-10

8-10

5

8-10

8-10

↑
翻轉5次
再手搓針筒5秒

不好記嗎?別擔心~請看下一頁



依標籤左上方標示數字由小到大排序

<p>(1) 檢驗科 MU72298101 測試3 503 M/0360310 I/LWAT0103 血液 血液培養瓶 OFF 607 06929747 20160722 08:50</p>	<p>(1) 檢驗科 MU72298101 測試3 503 M/0360310 I/LWAT0103 血液 血液培養瓶 OFF 607 06929747 20160722 08:50</p>	<p>(2) 檢驗科 HU72298101 測試3 503 M/0360310 I/LWAT0103 血液 藍蓋管 OFF COA 06929738 20160722 08:50</p>	<p>(3) 檢驗科 HU72298102 測試3 503 M/0360310 I/LWAT0103 血液 黑蓋細長管 兩條白線之間 OFF ESR 06929741 20160722 08:50</p>	<p>(4) 檢驗科 CU72298001 測試3 503 M/0360310 I/LWAT0103 血液 紅黃蓋 ON-8 A00 06929740 20160722 08:50</p>	<p>(5) 檢驗科 SU72298002 測試3 503 M/0360310 I/LWAT0103 血液 淺綠蓋管 ON- A2 NH3 06930181 20160722 08:54</p>	<p>(5) 檢驗科 SU72298002 測試3 503 M/0360310 I/LWAT0103 血液 肝素針筒 ON- A2 CO 06930181 20160722 08:54</p>
<p>(6) 檢驗科 HU72298001 測試3 503 M/0360310 I/LWAT0103 血液 紫蓋管 OFF CBC 06929744 20160722 08:50</p>	<p>(7) 檢驗科 CU72298601 測試3 503 M/0360310 I/LWAT0103 血液 2支灰頭 冰浴送檢 OFF PYR 06928429 20160722 08:50</p>	<p>(7) 檢驗科 CU72298601 測試3 503 M/0360310 I/LWAT0103 血液 2支灰頭 冰浴送檢 OFF PYR 06928429 20160722 08:50</p>	<p>(9) 檢驗科 M072298001 測試3 503 M/0360310 I/LWAT0103 膽汁 厭氧送檢</p>	<p>(9) 檢驗科 M072298002 測試3 503 M/0360310 I/LWAT0103 尿液 無菌尿杯</p>		


無關順序編號
皆為9

採檢管編號不連續時，一樣由小到大採血喔！




六、採血試管開蓋與鎖回蓋子方法

開蓋：

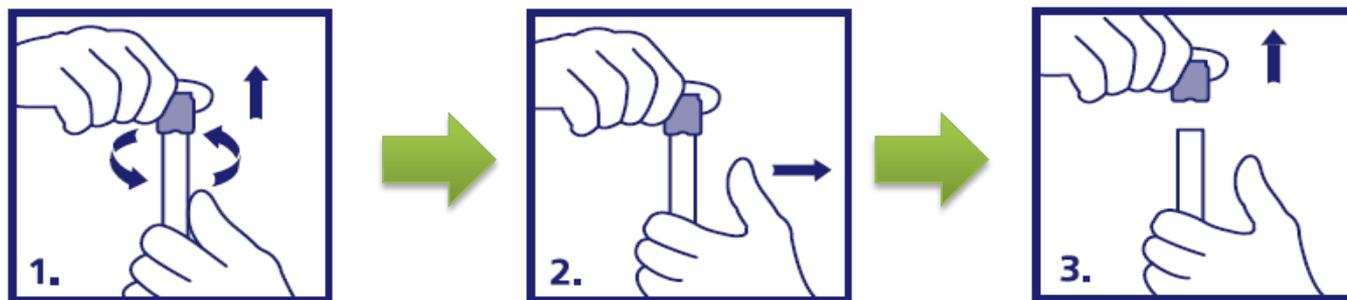

鎖回蓋子：

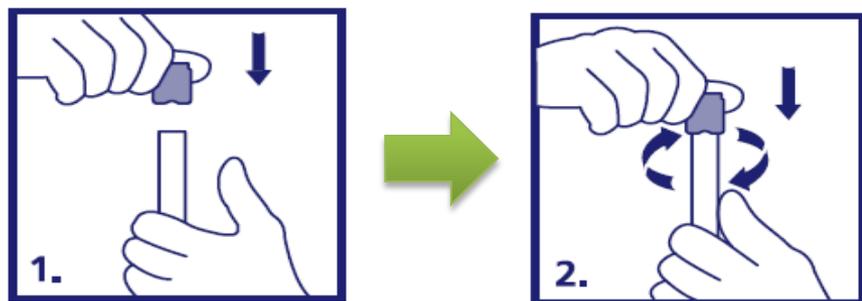

1下壓

2順時針旋轉

七、檢體未辨識提示

收件櫃台收到未辨識檢體反紅提示 → 一律退件(比照檢體不良退件)

長庚HIS

查詢 登記 收件 輸入 驗證 報表轉檔 維護 微生物組 品管 修改刪除 檢體管理 舊版 醫師 新版測試區 附屬功能

印表機名稱: doPDF 10 補 複製檢體項目

醫囑號 49794732 病歷號 500 條碼 C9122504569 操作院區 林口 新增 修改 存檔

收件號 C122504569 併號 確認 給號 收件後印標籤

姓名 王大明 來源別 門診 床位 實驗室代碼 L72 項目

出生日期 19880505 批價(Y/N) Y 自費 檢體別 B 血液

身分證號 A000000288 健保卡號 研 採檢日期 20191225

性別 F 血型 採檢時間 2001

來源號碼 LX191225002 FIO2 異常註記

醫師代碼 父親血型 檢體說明

醫囑醫師 母親血型

醫囑科別 3920 PEAK 體檢公司別

科別中文 檢驗醫學部 懷孕週數 體檢公司部門別

醫囑日期 20191225 一日尿流量

醫囑時間 1554 體檢序號

實收	項目	檢體	MK
<input checked="" type="checkbox"/>	72-314	B	R

目前已收件件數: 2筆

清除收件件數

X定位點 0 Y定位點 0 張數 1

啟動退件流程